

FRENCH

Scalp Mini

APPAREIL DE MASSAGE
DU CUIR CHEVELU

MANUEL D'UTILISATION

breo

Merci d'avoir choisi le produit de Breo.

Veillez lire attentivement ce mode
d'emploi avant l'utilisation et
conservez-le correctement pour
référence ultérieure.

Introduction

Intégré à la Théorie du massage médical traditionnel chinois, le masseur de cuir chevelu Scalp Mini de Breo exploite six techniques de massage traditionnelles : l'étirement, le pétrissage, la pression, la traction, la friction et l'effleurage avec ses 4 têtes de massage (chacune composée de 24 nœuds en forme de doigt). Scalp Mini offre un massage 3D profond et complet. L'unité principale est dotée d'IPX7 résistant à l'eau, s'adapte aux conditions humides, et peut être utilisée pendant la douche.



**Massage autour
des tempes**



**Amélioration de la
microcirculation au niveau
cérébral**



**Détente dans la
zone frontale**



**Relâchement des
muscles du cou**

Configuration du produit & de la fonction

Configuration du produit

Le produit comprend le masseur, le socle de recharge, le câble de chargement USB, le chiffon de nettoyage et un Manuel d'UTILISATION.



le masseur



le socle
de recharge



le chiffon
de nettoyage




le câble de
chargement USB



Manuel d'UTILISATION

Configuration de la fonction

1. Diagramme de puissance
2. Voyants
3. Socle de recharge
4. Port de charge
5. Contact massant

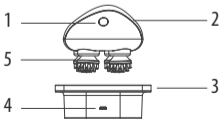

Instruction d'utilisation

Préparatifs avant l'emploi

Veuillez vérifier si le produit et tous les accessoires sont complets.
Veuillez contrôler si l'adaptateur secteur est endommagé.

Mise en charge

1. Placez le masseur sur le socle de recharge qui doit être connecté à l'adaptateur secteur d'origine de ce produit ;
2. Lorsque vous chargez ce produit, le voyant blanc émet des scintillements, puis reste allumé lorsqu'il est complètement chargé ;
3. Pendant le processus de charge, il ne fonctionnera pas ; si vous le chargez pendant son processus actif, il activera automatiquement son programme d'autoprotection et arrêtera de fonctionner ;
4. Un tel processus de charge va durer de 2 à 3 heures.

Mise hors tension

Lorsque l'appareil est à son état de mise sous tension, appuyez sur POWER pendant un certain temps pour l'éteindre.



Sélection de mode

Lorsque vous le démarrez, appuyez sur POWER pour accéder à n'importe quel mode de votre choix.

Mode 1 : Mode de rotation rapide ; le voyant blanc scintille une fois puis reste allumé ;

Mode 2 : Mode de rotation lente ; le voyant blanc scintille deux fois puis reste allumé ;

Mode 3 : Boucle de rotation rapide et lente ; le voyant blanc scintille 3 fois, puis reste allumé.


Situations requérant une attention

Afin de garantir votre usage correct et sûr, veuillez lire attentivement ce MANUEL D'UTILISATION avant d'allumer votre appareil. La société n'assumera aucune responsabilité résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une violation du MANUEL D'UTILISATION.

1. Veuillez ne pas l'appliquer pour masser une partie du corps ayant subi une intervention chirurgicale, ou sinon, veuillez respecter les consignes du médecin.
2. Veuillez ne pas l'appliquer pour masser une partie de la peau souffrant de blessures, d'irritation, d'inflammation et de congestion, etc.
3. Toute personne présentant une prédisposition dilatoire, des fonctions physiques et mentales altérées ou une dysgnosie n'est pas autorisée à appliquer cet appareil. Si nécessaire, veuillez respecter les consignes du médecin.

Situations requérant une attention

4. Dieses Produkt ist ausschließlich als elektronisches Gesundheitsprodukt konzipiert und darf nicht für medizinische Diagnosen, Behandlungen und andere kommerzielle Zwecke eingesetzt werden.
5. Les enfants, les femmes enceintes et les femmes qui se trouvent en période menstruelle ne sont pas autorisés à l'utiliser.
6. Veuillez ne pas utiliser cet appareil lorsque vous conduisez, et respectez strictement les réglementations applicables en ce qui concerne la conduite sécuritaire.

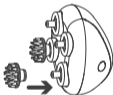

Situations requérant une attention

7. Veuillez appliquer notre adaptateur secteur d'origine et veiller à votre propre sécurité.
8. Si vous avez besoin de nettoyer l'apparence de cet appareil, veuillez le nettoyer en utilisant du coton alcoolisé et n'utilisez pas d'eau pour le nettoyer.
9. Veuillez éviter de le cogner et de le laisser tomber. N'utilisez aucun objet pointu susceptible de le rayer et le transpercer.
10. Le mineur doit l'utiliser en présence de parents ou d'autres adultes.
11. Si une quelconque condition anormale apparaît pendant l'utilisation, veuillez immédiatement débrancher l'alimentation et contacter la société. Veuillez renoncer à le réparer vous-même.
12. Veuillez immédiatement cesser de l'utiliser si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation.

Procédure de diagnostic

En cas de dysfonctionnement, contrôlez les points suivants. Si le problème ne peut pas être résolu ou si l'appareil ne fonctionne pas normalement, débranchez la source d'alimentation et contactez l'unité du service après-vente. Vous êtes priés de ne pas démonter l'appareil ni tenter de le réparer par vos propres moyens.

Défaut basique	Raisons possibles	Procédure de diagnostic
Impossible de l'allumer	Veillez contrôler si tous les câbles sont exempts de tout dommage	Veillez contrôler le branchement de tous les câbles
	Veillez vérifier si la puissance de la batterie est suffisante	Dans le cas contraire, veuillez remplacer la batterie
	Veillez contrôler si l'adaptateur secteur est correctement branché	Veillez vous assurer qu'il est correctement branché
La pression atmosphérique et la force de vibration sont faibles	Veillez vérifier si la puissance de la batterie est suffisante	Dans le cas contraire, veuillez remplacer la batterie
	Veillez contrôler si la puissance de l'appareil est suffisante	Dans le cas contraire, veuillez le connecter à l'adaptateur secteur pour la mise en charge

Caractéristiques techniques

Nom : Appareil de massage du cuir chevelu

Made in China

Modèle : Scalp Mini

Dimensions : 110 mm x 120 mm x 82 mm

Poids net : 320 g

Puissance : 5 W

Matériau : ABS, gel de silice

Tension : 5V =

Adaptateur secteur : 5V = 1A



DE 19863741

Numéro d'article: 231-429

Importateur:

SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5, D-96342 Stockheim
www.shp-company.com