



**Manuel de l'utilisateur pour
bandages chauffants**
AB15, WB25, KB35, SB45,
RB66, NB66, NSB75, EB85

Merci ...

d'avoir choisi notre bandage chauffant mc heat®.

Pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de votre bandage chauffant, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur et respecter les instructions.

Instructions de sécurité

Veuillez respecter les instructions de sécurité suivantes pour éviter les dommages éventuels causés à autrui ou à des objets et l'extinction éventuelle de la garantie en raison d'une utilisation non conforme.

- Nous conseillons aux femmes enceintes, aux enfants, aux personnes ayant un pacemaker ou d'autres.



problèmes de santé de consulter un médecin au sujet des risques éventuels pour leur santé avant d'utiliser le bandage chauffant.

- Si vous ne vous sentez pas à votre aise ou que vous ressentez un ou plusieurs phénomènes marginaux désagréables, éteignez le bandage chauffant et renseignez-vous auprès d'un médecin avant de continuer à l'utiliser.
- N'utilisez jamais le bandage chauffant lorsque celui-ci est mouillé.
- N'utilisez jamais le bandage pendant de longues périodes, ni pendant votre sommeil.
- N'insérez pas de pins ou d'aiguilles dans le bandage chauffant pour éviter d'endommager les éléments chauffants et/ou les câbles.
- N'utilisez pas le bandage chauffant sur les peaux sensibles.


- Un usage non-conforme peut conduire à des brûlures.
- N'allumez pas le bandage lorsque celui-ci est plié.
- Évitez tout contact de l'élément de commande avec le feu ou toute autre source chaude de chaleur.
- L'accu est conçu pour environ 500 rechargements.
- N'utilisez que le câble d'alimentation fourni pour charger l'accu.

Mise en marche

Avant la première utilisation, il est indispensable de charger l'accu durant plus de 5 heures. L'accu n'a été pré-chargé en usine qu'à des fins de contrôles de qualité. Les rechargements suivants dureront environ 4 heures jusqu'au chargement complet de l'accu. Connectez d'abord l'alimentation avec l'accu, puis branchez le chargeur sur la prise secteur. Le chargeur est conçu pour 110/230V.

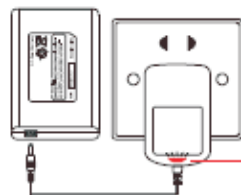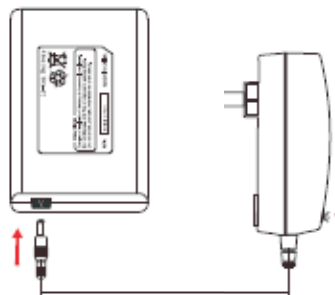

rouge LED =
chargement

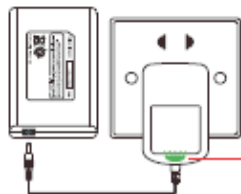

verte LED =
chargé
complètement

Élément de contrôle de l'accu

Branchement



Cherchez le câble d'alimentation dans le petit étui...




Connectez l'élément de contrôle.




Rangez l'élément de contrôle dans l'étui.

Allumez et choisissez la température

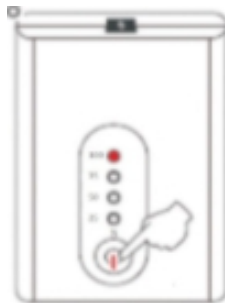


Maintenez le bouton "Allumer/Éteindre" durant 2 secondes jusqu'à ce que la LED rouge.

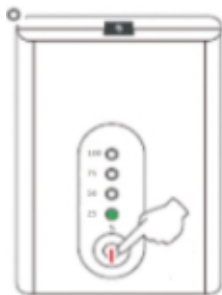


En appuyant brièvement plusieurs fois sur le bouton "Allumer/Éteindre", vous pouvez changer le réglage de la température. Vert = bas

Choisir la température

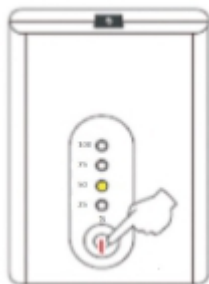


En appuyant brièvement plusieurs fois sur le bouton "Allumer/Éteindre", vous pouvez changer le réglage de la température.
Jaune= médium

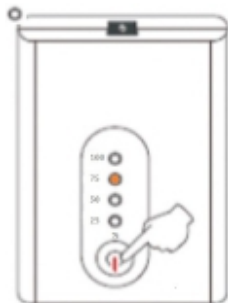


En appuyant brièvement plusieurs fois sur le bouton "Allumer/Éteindre", vous pouvez changer le réglage de la température.
orange = élevé

choisir la température et Éteindre

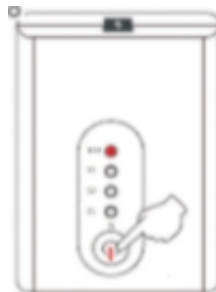

En appuyant brièvement plusieurs fois sur le bouton "Allumer/Éteindre", vous pouvez changer le réglage de la température.
rouge=maximum

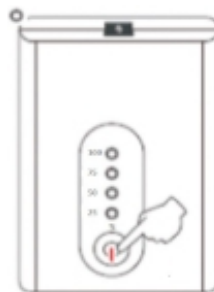

Pour éteindre l'élément de contrôle, maintenez le bouton "Allumer/Éteindre" durant 2 secondes, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.

Nettoyage et entretien



- Enlevez l'élément de contrôle avant de nettoyer.
- Le nettoyage à la main à l'eau froide avec du savon doux ou un produit détergent fin est vivement conseillé.
- N'utilisez jamais d'agents blanchissants de quelque sorte que ce soit.
- Étendez le bandage chauffant pour le sécher (ne le mettez pas au sèche-linge)
- N'essorez jamais le bandage chauffant et ne le repassez jamais, ceci pouvant endommager les éléments chauffants.

Garantie/Service

N'essayez jamais de réparer vous-même le bandage, l'élément de contrôle ou le chargeur en cas de dysfonctionnement, faut de quoi tout droit à garantie

s'éteindra. Veuillez contacter mc heat®.

La durée de la garantie est de 24 mois, calculés à partir de la date de la vente au premier consommateur final.

Un ticket de caisse daté ou une facture est nécessaire pour justifier des droits à garantie. Les quittances manuscrites ne valent pas pièces justificatives de garantie.

La garantie exclut les dommages/dysfonctionnements (entre autres et sans exception), qui seraient causés par des objets coupants, la torsion, la compression, la chute, l'eau, etc., la négligence, l'utilisation non conforme/l'abus, comprenant l'utilisation non

Garantie/Service

conforme/l'abus, comprenant l'utilisation non conforme aux dispositions de ce manuel de l'utilisateur, ainsi que l'utilisation de pièces non originales et l'intervention d'un tiers.

Dans tous les cas, contactez d'abord mc heat® si vous rencontrez des problèmes ou des questions concernant le bandage chauffant. Vous pouvez nous joindre par email au info@mc-heat.com. Nous essaierons de résoudre le problème avec vous. S'il devait s'avérer nécessaire de nous renvoyer le bandage, vous obtiendrez un numéro RMA. Celui-ci devra obligatoirement figurer sur le carton de retour de manière visible. Aucun retour de produit ne pourra être accepté sans ce numéro RMA.

Informations écologiques/recyclage

Le bandage chauffant ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères une fois sa durée de vie écoulée. Déposez ce bandage au système de recyclage des déchets électroniques. Veuillez disposer de celui-ci auprès des lieux de collecte correspondants. Vous obtiendrez toutes les informations à ce sujet auprès de votre ville ou commune.

Les batteries et accus ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. La loi vous oblige à retourner les batteries et accus usagés. Vous pourrez déposer vos vieilles batteries auprès des lieux de collecte officiels et dans tous les lieux de vente de batteries. Bien entendu, vous pouvez également nous retourner gratuitement l'accu livré avec le produit.

Informations écologiques/recyclage

Informations écologiques/recyclage

Les batteries contenant des produits dangereux sont marquées de la façon suivante:

Pb = la batterie contient du plomb

Cd = la batterie contient du cadmium

Hg = la batterie contient du vif-argent



Données techniques

Données techniques chargeur:

Entrée: 100 / 240V AC 50/60Hz 0,25A

Sortie: 8,4V DC 0,7 A






Données techniques bandage:

Entrée: 7,4 V accu ionique lithium


Matériau du bandage: 97% néoprène

3% polyamide


Bandage dorsal/pour les chevilles

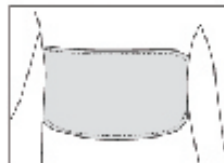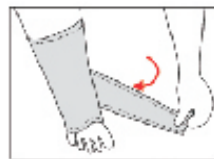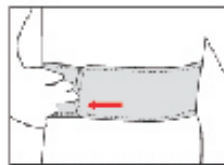




Bandage pour les coudes/ pour les épaules

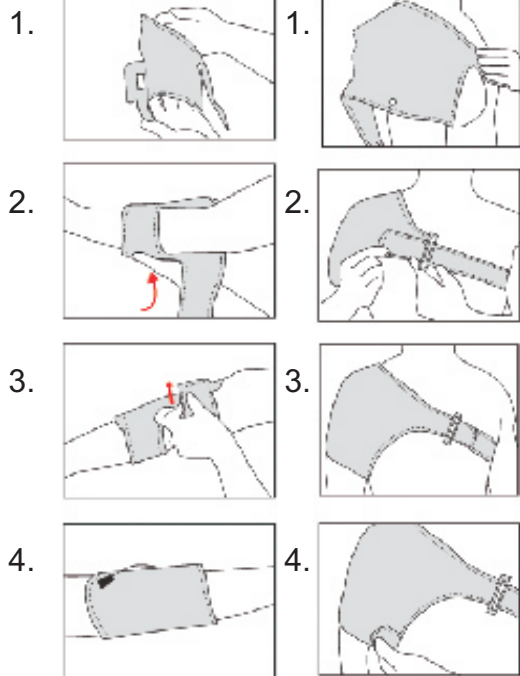

bandage pour la nuque / bandage pour la nuque et les épaules

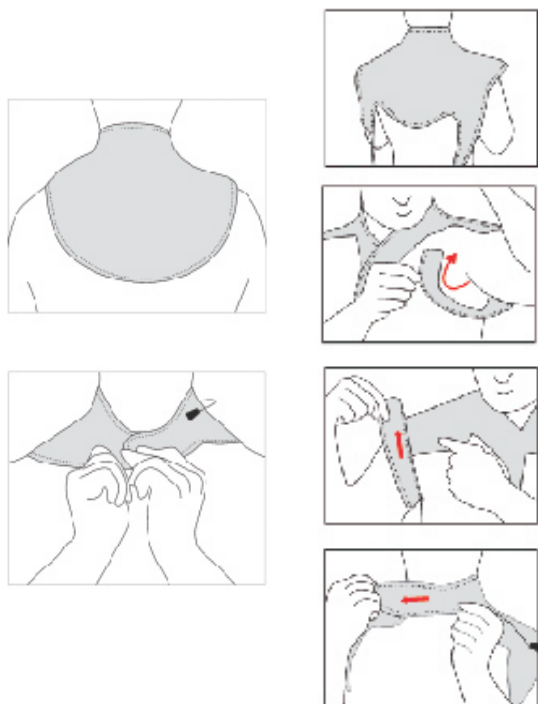

Bandage pour le poignet / bandage pour le genou

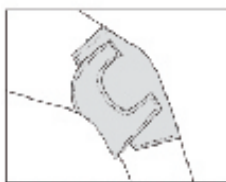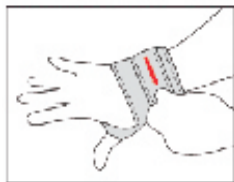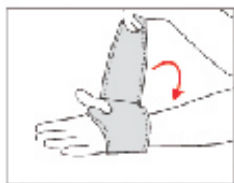

Adresse

MM-Store GmbH
Gesandtenstrasse 6
D-93047 Regensburg
+49-(0)941-59937226
www.mc-heat.com
info@mc-heat.com

Vous trouverez encore d'autres produits
chauffants intéressants sur internet, sur
la page www.mc-heat.com